

BENTLON

BRUGERMANUAL



Bentlon Podo Sølv (Roter) 65831
- 65834

Forord

Vi vil gerne takke dig for den tillid, du har vist os. Vi kan garantere, at du har truffet et fremragende valg. Designet af dette produkt vil bidrage til dit instituts professionelle image. Du skal læse denne manual omhyggeligt, da hvis dit produkt bruges korrekt, vil det have en længere levetid, og du vil ikke blive skuffet på nogen måde. Opbevar denne vejledning lige ved hånden, så du hurtigt kan læse den, hvis du har brug for det.

Advarsel:

Alt muligt er blevet gjort for at garantere sikker brug, men det er vigtigt, at du læser denne manual grundigt igennem. Hvis du er i tvivl om noget, skal du straks kontakte din leverandør.

Udviklingsafdelingen er altid på udkig efter de nyeste teknologier og knowhow. Af denne grund kan der være små afvigelser i teksten i denne manual eller i betjeningen.

Indhold

1. GENERELLE OPLYSNINGER.....	4
1.1 FUNKTIONER PODIATRY KOMFORT	4
1.2 FØR STOLEN BRUGES.....	4
2. BETJENING AF PRODUKTET.....	6
2.1.1 Betjening af stolen	
2.1.2 Justeringer	6
2.1.3 Hældning	7
2.1.4 Justering af ryglæn.....	8
2.1.5 Armlæn	9
2.1.6 Højdejustering	9
2.1.7 Justering af ben og fodstøtte	10
3. VEDLIGEHOLDELSES- OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER	11
3,1 VEDLIGEHOLDELSE	11
3,2 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER	11
3,3 DIMENSIONER	12
4. TEKNISKE SPECIFIKATIONER.....	13
5. OPLYSNINGER OM GENBRUG	14
6. PRODUKTETIKET	15
7. GARANTI	16
7.1 GARANTIPOLITIK	16
7.2 GARANTIPRAV	16
EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING.....	

1. GENEREL INFORMATION

Dit produkt er sammen med tilbehøret pakket i en æske, der er egnet til normal forsendelse.

Dog kan der opstå transportskader. For at sikre, at produktet ikke blev beskadiget under transport, anbefaler vi, at du kontrollerer produktet på følgende måde:

- (1) Pak produktet og tilbehøret forsigtigt ud.
- (2) Tjek produktet og æsken for ridser, buler, rifter osv.
- (3) Kontroller alle knapper, forbindelser og kontakter for mulige skader.
- (4) Kontroller tilbehøret for skader.

Hvis produktet eller tilbehøret er blevet beskadiget under transporten, skal du meddele dette skriftligt til din leverandør senest 15 dage efter modtagelsen af produktet. **Transportskader, der ikke anmeldes eller anmeldes for sent, er ikke omfattet af garantien.**

1.1 Funktioner Podiatry Comfort

Podiatry Comfort er basismodellen blandt pedicurestolene. En hånd-/fodkontakt betjener elektrisk højden, hældningen af sædet og ryglænet uafhængigt af hinanden. Begge benstøtter kan justeres uafhængigt i 3 retninger. Detaljer om de justerbare dele er beskrevet i kapitlet 'Betjening af produktet'.

1.2 Før stolen tages i brug


- Efter at have fjernet hæfteklammerne, der forbinder den midterste del af æsken med bunden, denne midterste sektion kan nemt tages af.
- Stolen står nu frit på kassebunden. Tjek nu, om der ikke er sket skader på stolen under transporten. I tilfælde af skader ring omgående til forhandleren.
- Nu kan to personer løfte stolen og bære den forsigtigt til det sted, du havde i tankerne.

I plastikposen, der følger med stolen, finder du det nødvendige værktøj til at montere stolen på gulvet.





Figur 1.1 Værktøjer

På begge hjørner på bagsiden af stolen finder du justerbare fødder. (Se illustration 1.2). De kan skrues til højre for at gøre dem kortere og venstre for at gøre dem længere. En ujævn gulvbelægning eller på anden måde ustabilitet i stolestøtterne kan korrigeres med disse justerbare fødder. Juster stolen til den højest mulige position og vip den til siden for at få let adgang til fødderne.

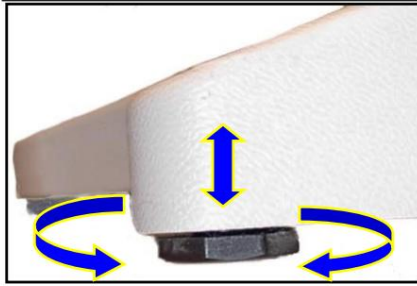

Figur 1.2 Justerbar fod

- For at montere stolen skal du justere højden til omtrent det niveau, der er vist i.
- Skær derefter forsigtigt plastikpropperne af bunden med en lille kniv (se figur 1.3)

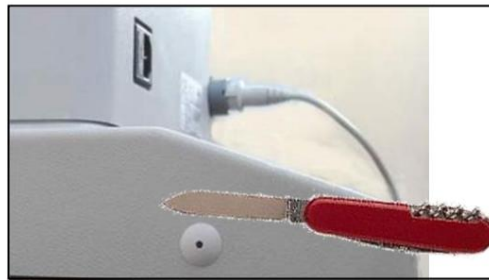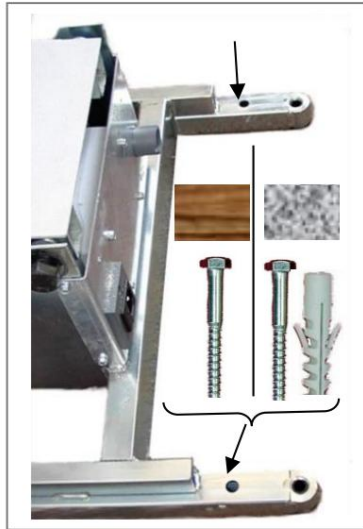

Figur 1.3

- Nu kan dækslet nemt tages af.
- De eventuelt resterende stykker af de 4 propper kan nemt fjernes med et værktøj.
- Monter nu stolen på gulvet.
- Når du har et trægulv, brug kun de to medfølgende skruer.
- Når stolen skal monteres på et sten- eller betongulv, skal du først indsætte de to medfølgende vægpropper, inden stolen monteres med skruerne. Til boring i et sten- eller betongulv skal du bruge et Ø 12 mm stenbor.

Efter at have monteret stolen på gulvet, kan begge betræk monteres på stolen igen. Til dette job skal du bruge de 4 stik og værktøjet

- Sæt det medfølgende værktøj ind i et af stikkene.
- Med et let hammerslag slås propperne ned i hullerne. Gentag dette for de andre 3 stik.

2. BETJENING AF PRODUKTET

2.1.1 Betjening af stolen

Sæt først netledningen i en stikdåse eller en stikkontakt.


Bemærk: Før

du tilslutter netledningen til lysnettet, skal du kontrollere, om netspændingen angivet på CE-mærkatet (på bagsiden af stolen) svarer til netspændingen i dit land eller område.

2.1.2 Justeringer

Stolens funktion kan justeres elektrisk med kontakterne på håndbetjeningen (se figur 2.2).

Hold kontakterne trykket ned, indtil den ønskede position er opnået.

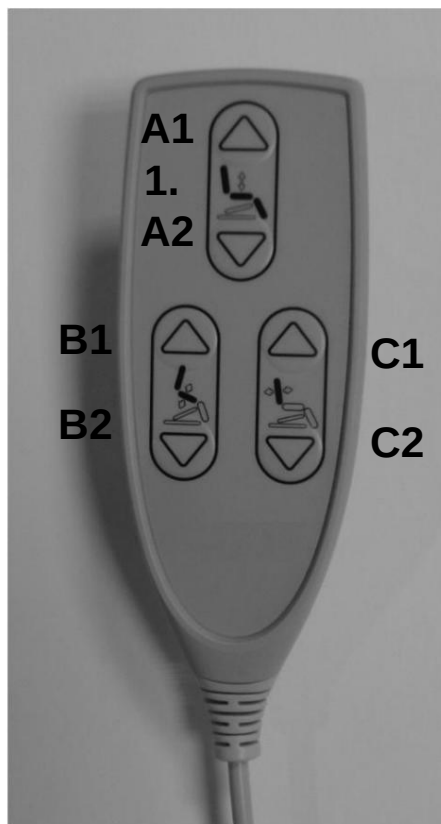

A1 Stol opad
A2 Stol nedad
B1 Hældning
B2 Reklination
C1 Rygstøtte foran
C2 Rygstøtte bagud

Figur 2.2 Justeringer



Betjeningsmuligheder

- 1 Håndafbryder.
- 2 Handel for at låse bevægelse ud og ind af benstøtten.
- 3 Handel for at flytte benstøtten op og ned.
- 4 Justerbare fødder.
- 5 Drej til rygbar armlæn.

Figur 2.3 Betjeningsmuligheder

2.1.3 Hældning


Hældningsjusteringen kan betjenes elektrisk med håndbetjeningen. Figur 2.4 viser, hvordan sektionerne bevæge sig.



Figur 2.4 Bevægelige sektioner

2.1.4 Justering af ryglæn Stolens ryglænsjustering

styres elektrisk med håndbetjeningen. Figur 2.5 viser, hvordan sektionen bevæger sig.

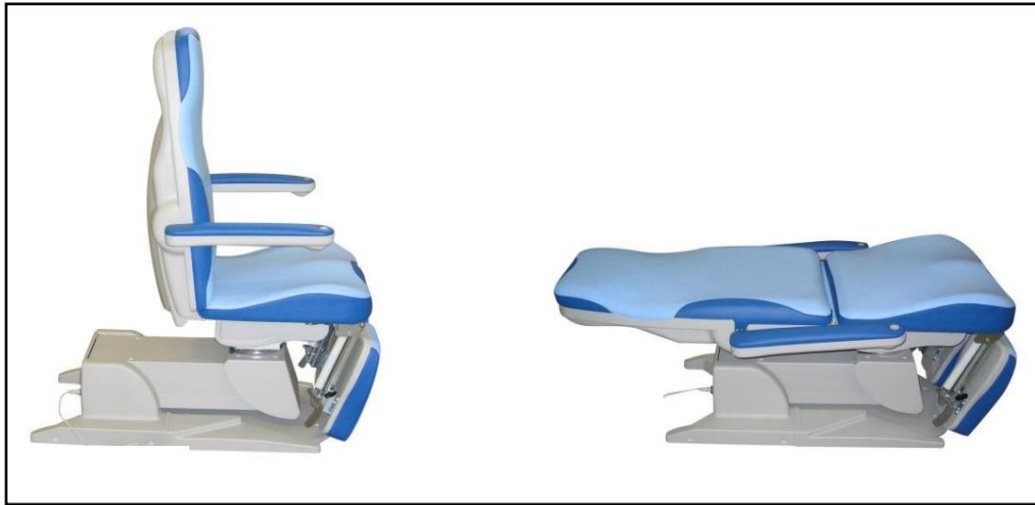


Figur 2.5 Ryglænsjustering

2.1.5 Armlæn

Som regel forbliver armlænene parallelle med sædet. Når stolen er helt vandret, er armlænene foran på samme niveau som sædet. Det giver dig mulighed for at bruge stolens fulde bredde. Med stolen i fuld længde er det også muligt at dreje armlænene bagud under ryglænets niveau.


Dette kan anbefales til rygmassage. For en klient, der ligger med ansigtet nedad, betyder det, at han kan hvile sine arme i en naturlig stilling. Det lille hul i det yderste punkt af armlænene giver dig mulighed for at montere den valgfrit tilgængelige manicureskål (fig. 2.7). For at give din klient nem adgang, kan armlænene drejes bagud.

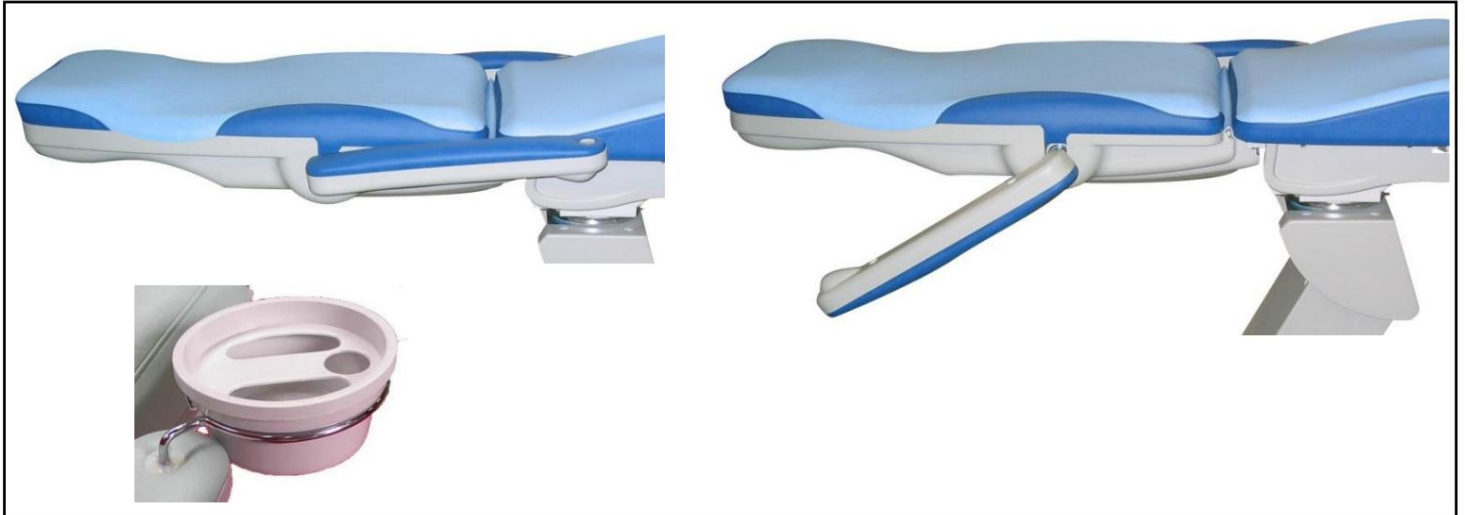

Figur 2.7

2.1.6 Højdejustering

Funktionen af stolens højde kan justeres elektrisk med håndbetjeningen (fig. 2.2). Hold kontakten trykket ned, indtil den ønskede position er opnået (fig. 2.8).

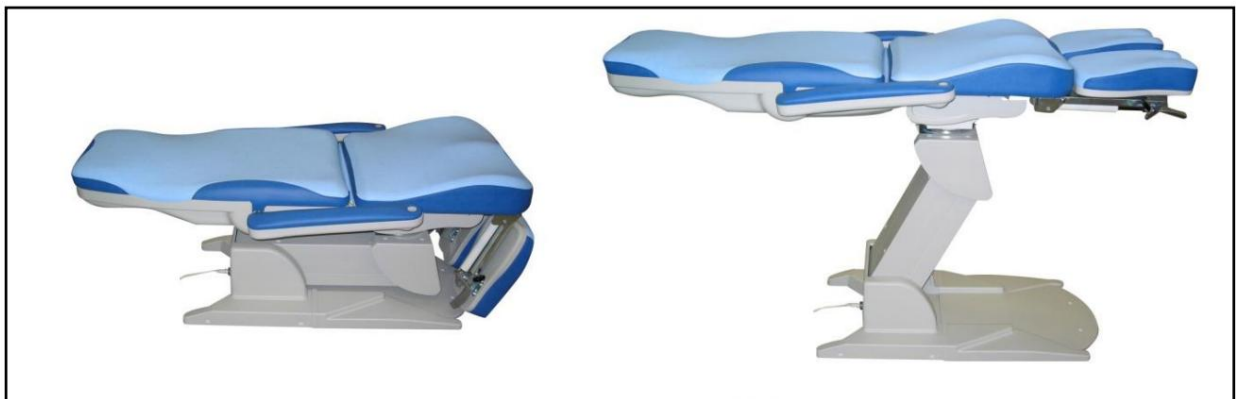


Figur 2.8

2.1.7 Justering af ben og fodstøtte


Benstøtten er tre-vejs justerbar:

Længde: Benstøtterne kan på en enkel måde forlænges mere end 20 centimeter (fig. 2.9). Løsn knappen på ydersiden af benstøtten og træk eller skub benet til den ønskede position. Drej let på knappen igen for at stramme benstøtten. Det er ikke nødvendigt at spænde denne knap fast.

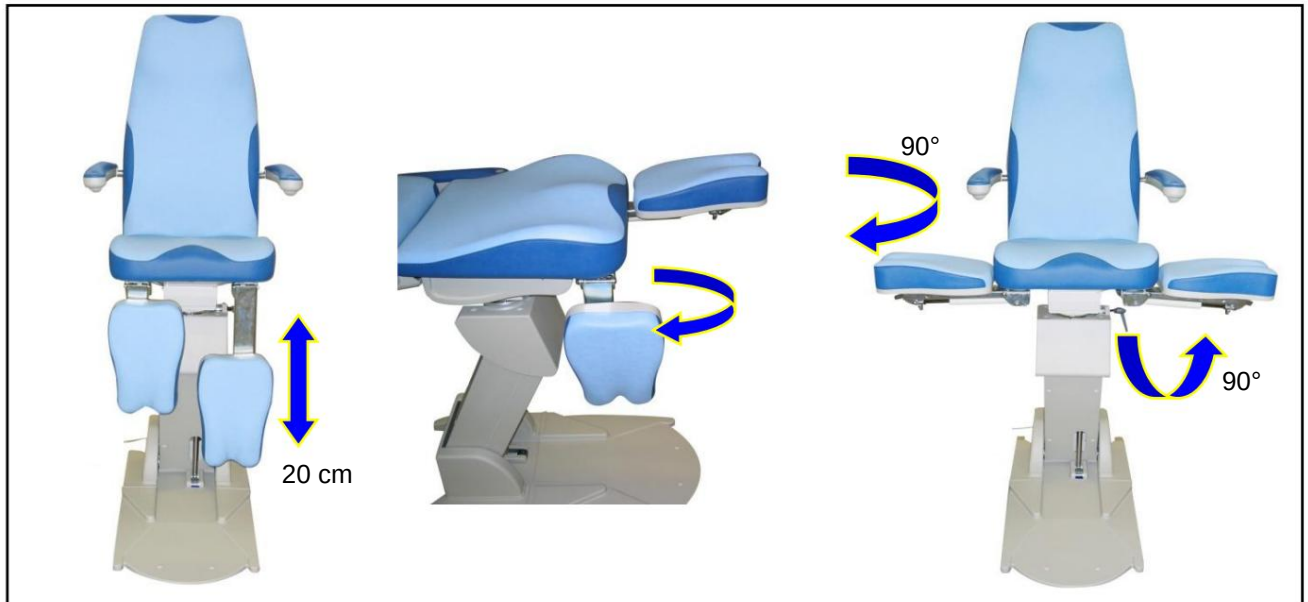

Figur 2.9

Højde: For at justere benstøtten skal du slippe håndtaget (fig 2.10) mod pilen og blot trække benstøtten højt. Til sænkning betjenes udløserhåndtaget igen mod pilen. Sænk benstøtten ved at sænke armen, så snart den ønskede position for benstøtten er nået.

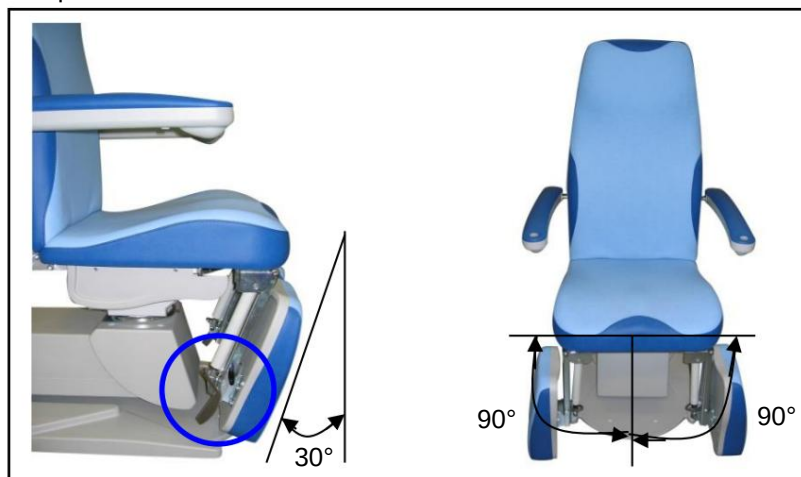

Figur 2.10

Sidelæns: For at justere benstøtten op til 90° sidelæns, skal du blot skubbe benstøtten udad eller tilbage (figur 2.10). Benstøtten vendt udad letter tilgængeligheden af fodens inderside. Det er nemt at komme ind i stolen for ældre og mindre personer.

3. VEDLIGEHODELSE OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

3.1 Vedligeholdelse

- Fjern pletter med det samme, da de ellers kan blive permanente eller beskadige vinylen. Vær især forsigtig med sololie, insektmidler og make-up. Prøv pletfjernelse først på et iøjnefaldende sted.
- Tør polstring og huse af regelmæssigt med en fugtig blød klud. • Fjern pletter med en opløsning af blød husholdningssæbe og brug en blød klud (om nødvendigt en blød børste).
Fjern resterne af sæbe med en ren fugtig klud og tør derefter stolen med et håndklæde. Brug lunkent vand og lad være med at mætte polstringen. Sørg for at tørre sømmene ordentligt.
- Genstridige pletter kan generelt fjernes med isopropylalkohol fra apoteket; Sørg for at du tørrer det af med en fugtig klud.
- Hvis pletterne ikke kan fjernes fra polstringen, skal du kontakte din leverandør. Brug ALDRIG slibemidler, pandesvampe, blegemidler eller opløsningsmidler såsom denatureret sprit, benzen, acetone osv. Disse kan gøre polstringen eller plastikhusene sløve eller beskadige dem.
- Vær forsigtig med vand i nærheden af den elektriske fodpedal og el-nettet, og sørg for, at der ikke er vand kan løbe ind i kolonnen.
- Selvom stolen ikke skal vedligeholdes, er et regelmæssigt eftersyn hvert andet år tilrådeligt.
Kontakt din forhandler for dette.
- Når betjeningen af stolen ledsages af en klemmelyd, kan dette rettes ved at tænde en smule tynd olie (symaskineolie) på det sted. Hvis dette problem ikke kan løses med dette, bedes du kontakte din forhandler.


3.2 Sikkerhedsforanstaltninger

Disse stole er meget vellavede og er fremstillet til at holde i mange år. For optimal brug er det vigtigt, at stolene bruges i henhold til denne vejledning.


- Sid aldrig på ryggen eller benstøtten. Hvis du gør dette, kan det resultere i alvorlig skade på støtten stolens stel.
- Bunden af klienten skal altid være på stolens sæde, selv når man sætter sig ind i en stol massagepositionen. Dette garanterer stabiliteten af hele enheden.
- Stå ikke på fodbetjeningskablet, og kontroller regelmæssigt ledningerne for brud. Udskift disse hvis nødvendig.
- Sørg for, at stolens netledning er i korrekt stand. Tjek den regelmæssigt, og få den udskiftet i tilfælde af skade.

3.3 Dimensioner

For dimensioner (i millimeter) se figur 3.1.

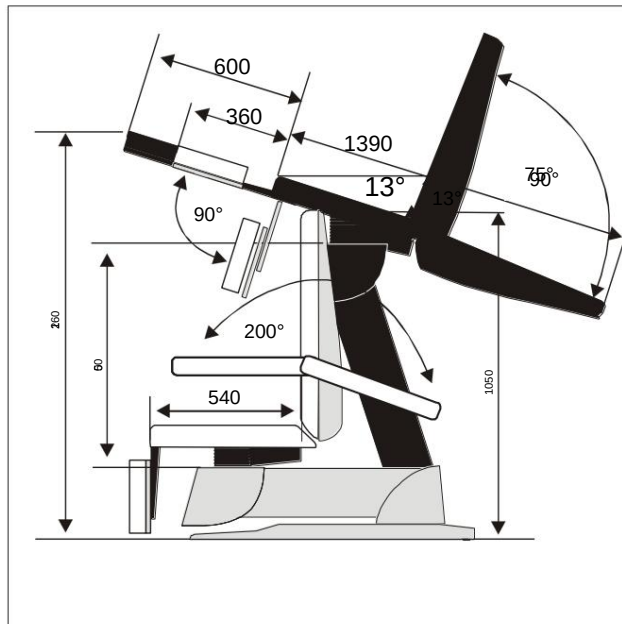

Figur 3.1 Dimensioner

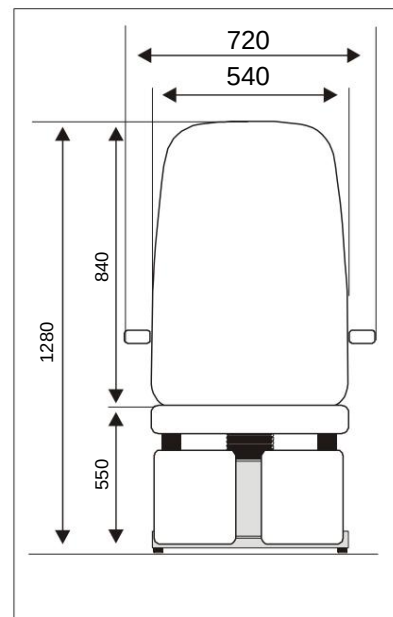

4. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

	230 volt	
Mål (L x B x H) Maks.-Min. (cm)	178-202 x 72 x 55-105	
Sædebredde	54 cm – 72 cm	
Vægt	87 kg	
Tilslutningsværdi	AC 220-240V; 50/60 Hz	
Maksimal jævn belastning på sæde	200 kg	
Strømforbrug	96 watt	

5. OPLYSNINGER OM GENBRUG

Dancohr har opstillet tekniske og økonomisk gennemførlige mål for at optimere produkternes, servicens og aktiviteterne økologiske ydeevne.

I planlægnings-, design- og produktionsfaserne lægger Dancohr vægt på fremstilling af udstyr, der nemt og billigt kan genanvendes. Derudover er Dancohr stærkt involveret i deltagelse i returprogrammer og i nationale samarbejdsprojekter om at udarbejde og implementere genbrugsprocedurer for genanvendelse af elektrisk udstyr i større skala.

Symbolet for direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) er angivet nedenfor.



Brugen af ovenstående symbol for affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. Dette er fastlagt i det europæiske direktiv 2002/96/EC vedrørende bortskaffelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, bidrager du til beskyttelsen af miljøet. Du som ejer er ansvarlig for bortskaffelse af produktet til det nærmeste indsamlingssted for elektrisk og elektronisk affald. For mere detaljerede oplysninger om genbrug af dette produkt, kontakt din lokale myndighed, husholdningsaffaldsservice eller den butik, du købte dette produkt fra.

6. PRODUKTETIKET

Produktetiketten indeholder følgende data:

Etiket til 230V produkt

Etiket for andet produkt end 230V

BENTLON 		Bentlon De Noord 27, 6001 DA Weert The Netherlands www.bentlon.com		CE	
REF					
					
special info					
Fuse external		SN			
Voltage		   			
Frequency					
Power					

BENTLON 		Bentlon De Noord 27, 6001 DA Weert The Netherlands www.bentlon.com			
REF					
					
special info					
Fuse external		SN			
Voltage		   			
Frequency					
Power					



Producentens adresseoplysninger.

REF

Produktets referencenummer og navn.



Fremstillingsdato (måned år / serienummer på den pågældende dag).

Særlig info: Ekstra information.

Ekstern sikring: Sikringens værdi ved forsyningstilslutningen.

Spænding: Påkrævet spændingsniveau for korrekt arbejde i volt.

Frekvens: Påkrævet frekvens for korrekt arbejde i Hertz.

Strøm: Strømforbrug i watt.

SN

Produktets serienummer.



Advarsel, læs de medfølgende dokumenter før brug.



Skrøbelig, håndteres med omhu.



Hold produktet tørt.



Denne maskine skal bortskaffes på en miljømæssigt ansvarlig måde.

Dette mærke garanterer, at produktet er konstrueret i overensstemmelse med de seneste EU-direktiver. Fjern ikke dette klistermærke. De oplysninger, der er angivet på mærkaten, er vigtige for garantien, og du skal angive disse oplysninger, hvis du har brug for information om maskinen fra din leverandør.

7. GARANTI

7.1 Garantipolitik

Denne garantipolitik er afledt af de generelle vilkår og betingelser indgivet til Handelskammeret.

Leverandøren forlænger en 24-måneders generel garanti på dette produkt med hensyn til fejl og maksimalt 60 måneder for konstruktionsfejl. Garantiperioden begynder på fakturadatoen.

Ethvert forsøg fra personer eller organisationer, der ikke er udpeget som kvalificeret af leverandøren, på at reparere, ændre eller modificere produktet ud over de handlinger og operationer, der er beskrevet i brugervejledningen, vil resultere i udløb af garantien og af ethvert ansvar fra leverandørens side. Leverandøren er på ingen måde ansvarlig for de skader, der følger af disse handlinger.

Leverandøren og dennes repræsentation kan ikke holdes ansvarlig for nogen skade, (fysisk) skade eller dårlig funktion af produktet forårsaget af ukorrekt, uagtsom og/eller inkompetent brug som følge af utilstrækkelig undersøgelse af instruktionerne som beskrevet i brugermanualen eller som opnået fra uddannelsen Rute.

Misfarvning af betræk og andre dele som følge af ikke-farveægte tøj, aggressive rengøringsmidler eller olieholdige produkter er ikke dækket af garantien.

Følgende betingelser skal være opfyldt for at sikre den optimale drift af produktet:

- Den elektriske installation af det pågældende rum skal overholde de gældende, lovbestemte forskrifter; Ved køb skal
- tilstedeværelsen af alt tilbehør, dele og brugermanualen verificeres.
Meddelelse om eventuelle manglende varer eller skader på en eller flere af de leverede dele skal indsendes til Leverandøren senest 7 dage efter fakturadato. Udebliver der inden for den angivne tidsfrist verifikation og/eller indsendelse af meddelelse om skade på eller manglende genstande fra de nødvendige enheder, udløber garantien.
- Produktet skal bruges af autoriserede personer i overensstemmelse med instruktionerne som angivet i denne brugervejledning eller som opnået på uddannelseskurset.
- Produktet skal bruges til de formål, det er designet til; Vedligeholdelse af produktet
- skal ske regelmæssigt og skal udføres på den foreskrevne måde; De lovbestemte forskrifter med hensyn til brugen af
- denne maskine skal overholdes.

Leverandørens serviceafdeling giver en bindende vurdering af overholdelsen af betingelserne i forbindelse med reparation under garantien.

7.2 Garantikrav

Ved mangler eller bygningsmæssige mangler skal kunden henvende sig til Leverandøren.

Leverandøren forbeholder sig retten til at ændre enhedens specifikationer i overensstemmelse med den tekniske udvikling af produktet.



EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

B Industries BV
De Noord 27
6001 DA Weert
Holland Tlf.: +31
(0)495 745 005 E-mail:
info@bentlon.com Hjemmeside:
www.bentlon.com

Erklærer hermed, at dette produkt opfylder betingelserne i henhold til de europæiske retningslinjer og denne enhed:

1. opfylder betingelserne i maskinvejledningen
 - 2006/42/EF
2. opfylder betingelserne angivet i lavspændingsvejledningen
 - 2006/95/EF
3. opfylder betingelserne angivet i retningslinjen for elektromagnetisk kompatibilitet
 - 2004/108/EF